



Flexi-Flange® Fiber



CARATTERISTICHE

Il perno in fibra con la più alta ritenzione nel dente.*

Gli UNICI perni in fibra che offrono un'elevata ritenzione SENZA la necessità di un bonding.

Ritenzione grazie alla filettatura, senza stress da inserzione.

Le molteplici spire offrono stabilità a differenza di ogni altro perno in fibra liscio.

La flangia e la spalla sul Flexi-Flange Fiber.

L'intera lunghezza del gambo è scanalata.

Testa altamente ritentiva.

Nel colore del dente

Tecnica adattabile all'altro sistema di perni in fibra di Essential Dental Systems Flexi-Post Fiber.

VANTAGGI

Garantisce un successo clinico a lungo termine.

Per il dentista una tecnica semplice ed un tempo di lavoro alla poltrona ridotto.

Il maschiatore brevettato a doppia punta si chiude durante l'inserimento per offrire la massima ritenzione con il minimo stress.

Distribuiscono gli stress funzionali sulla parte più resistente della radice.

Offrono resistenza contro lo svitamento del perno e la sua frattura.

Aumentano il contatto tra il perno ed il punto dove per natura il canale tende ad allargarsi, migliorando di conseguenza la stabilità, evitando la rottura del cemento e rafforzando notevolmente la ritenzione nel lungo termine.

Rilascio delle pressioni idrostatiche interne durante la fase di cementazione.

La testa è compatibile con tutti i tipi di TiCore,® compositi per ricostruzioni di monconi. Le incisioni verticali e orizzontali fanno da ancoraggio al materiale per la ricostruzione del moncone.

Perfetto per ogni ricostruzione estetica.

Metodo predicibile di posizionamento del perno per ogni situazione clinica (Flexi-Post Fiber è raccomandato nei casi con dentina coronale per preservare la struttura coronale del dente).



I maschiatori hanno un codice colore corrispondente alle misure dei perni.

Il maschiatore brevettato a doppia punta

Durante l'inserimento del maschiatore e la creazione delle spire, gli stress di inserzione sono assorbiti dal maschiatore stesso (non dalla radice) - eliminando potenzialmente le principali cause della rottura della radice. Le lame in senso verticale rimuovono i detriti dentali consentendo un posizionamento del perno più facile.

Flexi-Post Fiber e Flexi-Flange Fiber offrono in modo predicibile la massima ritenzione con il minimo stress. Senza la necessità di alcun bonding.

* Data on File

Flexi-Flange Fiber

NON UN ALTRO PERNO IN FIBRA "LISCIO"


La testa dentellata offre la maggior ritenzione per il materiale per la ricostruzione.

La spalla e la flangia aumentano l'adattabilità tra il perno ed il punto nel quale il canale tende ad allargarsi per natura riducendo quindi i lunghi bracci di leva distruttivi.

La scanalatura di Flexi-Flange Fiber libera la pressione idrostatica interna durante la cementazione.

Disegno filettato per avere una ritenzione maggiore rispetto agli altri perni in fibra passivi senza la necessità di bonding.

**REALIZZATI CON UNA FIBRA DI VETRO ESCLUSIVA,
DI ELEVATA RESISTENZA E RINFORZATA CON RESINA
EPOSSIDICA**

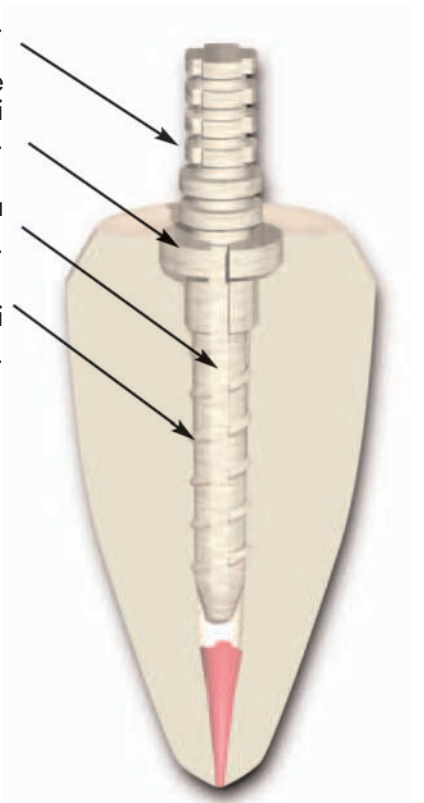

PROPRIETÀ

Numero del perno	0	1	2
Codice Colore	GIALLO	ROSSO	BLU
Lunghezza della testa	4.0mm	5.0mm	6.0mm
Lunghezza del gambo	8.0mm	9.5mm	10.4mm
Lunghezza totale del perno	12.0mm	14.50mm	16.4mm
Diametro del gambo (senza spire)	0.88mm	1.09mm	1.22mm
Diametro del gambo (con spire)	1.17mm	1.45mm	1.65mm
Diametro del Reamer Primario	0.90mm	1.20mm	1.45mm
Lunghezza del Reamer Primario (Parte tagliente del gambo)	9.00mm	11.00mm	12mm
Modulo di Elasticità	41 GPa	41 GPa	41 GPa

Realizzati con una fibra di vetro esclusiva, di elevata resistenza e rinforzata con resina epossidica.

PER ORDINI:

Flexi-Flange Fiber Intro Kits:

Intro Kit da 12 Perni... Codice 2410-00

Misura 0 (Giallo)
6-perni, 1-maschiatore, 1-reamer primario, 1-countersink drill

Misura 1 (Rosso)
6-perni, 1-maschiatore, 1-reamer primario, 1-countersink drill

Chiave esterna (adatta ad entrambe le misure), 1-Regolo

Intro Kit da 12 Perni... Codice 2410-01

Misura 1 (Rosso)
6-perni, 1-maschiatore, 1-reamer primario, 1-countersink drill

Misura 2 (Blu)
6-perni, 1-maschiatore, 1-reamer primario, 1-countersink drill

Chiave esterna (adatta ad entrambe le misure), 1-Regolo

Flexi-Flange Fiber Refill Kits:

Kit Refill da 10 Perni Misura 0 (Giallo) Codice 2430-0

10-perni, 1-maschiatore, 1-reamer primario, 1-countersink drill

Kit Refill da 10 Perni Misura 2 (Blu) Codice 2430-02

10-perni, 1-maschiatore, 1-reamer primario, 1-countersink drill

Kit Refill da 10 Perni Misura 1 (Rosso) Codice 2430-01

10-perni, 1-maschiatore, 1-reamer primario, 1-countersink drill

Maschiatori:

Maschiatore per le misure 0 di Flexi-Post Fiber e Flexi-Flange Fiber codice 2150-0

Maschiatore per le misure 1 di Flexi-Post Fiber e Flexi-Flange Fiber codice 2150-01

Maschiatore per le misure 2 di Flexi-Post Fiber e Flexi-Flange Fiber codice 2150-02

Per la linea completa di tutti i prodotti brevettati EDS visitate il sito web: www.edsdental.com



Maxi Medical Srl • Via Zumbini 38 • 20143 Milano • tel. 02.89.12.48.38 • fax 02.89.12.49.70 • www.maximedical.it